



EV01



8 km/h



2 x 45 Ah



25 km



Free-Shock

Der EVO1 ist ein kompakter Elektrorollstuhl für den Innen- und Außenbereich, ausgestattet mit Vorderrad- oder Hinterradantrieb.

Der modulare Aufbau bietet die Möglichkeit auf die individuellen Gegebenheiten und Erfordernisse des Nutzers reagieren zu können. Wahlweise ausgestattet mit elektrischen Funktionen, wie dem Sitzlift oder einer Sitzwinkelverstellung, bietet der EVO 1 umfangreiche Vorteile bei der Pflege und Entlastung des Körpers und eröffnet neue Möglichkeiten im Leben des Nutzers.

Der EVO1 bietet uns die Möglichkeit das Free-Shock System zu integrieren. Dieses System lässt ruckartige Streckbewegungen, z.B. hervorgerufen durch spastische Erkrankungen, kontrolliert zu und baut die Muskelspannung langsam ab. Hierdurch wird das Risiko von Muskel- und Knochenschäden bei der Nutzung des Elektrorollstuhls deutlich reduziert.

In Kombination mit den Buddy Brace Sitzsystemen bildet es eine optimale Einheit, um die Häufigkeit und Intensität von Spastiken durch Muskelhypertonie zu verringern.

EIGENSCHAFTEN



Kompaktes Fahrgestell mit Vorder- oder Hinterradantrieb



2 elektrische Verstellungen (optional)



Dynamische Rückenwinkelverstellung



Leichte Manövrierung und hoher Fahrkomfort



Große Auswahl an Buddy Brace Sitzsystemen



Modulare Auswahl der Konfiguration zur optimalen Versorgung

TECHNISCHE DATEN

Gesamtlänge mit Beinstützen:

EVO1 F (Vorderradantrieb) 930 - 980 mm

EVO1 R (Hinterradantrieb) 1000 - 1040 mm

Gesamtbreite mit Rädern 490 - 550 mm

Gesamtbreite mit Armlehnen 470 - 610 mm

Minimale Transportlänge:

EVO1 F (Vorderradantrieb) 830 mm

EVO1 R (Hinterradantrieb) 760 mm

Wenderadius:

EVO1 F (Vorderradantrieb) 330 mm

EVO1 R (Hinterradantrieb) 425 mm

Sitzhöhe 450 mm

Sitzbreite 300 - 440 mm

Rückenbreite 300 - 440 mm

Rückenhöhe 450 - 550 mm

Rückenwinkelverstellung 90° - 135°

Beinwinkelverstellung 90° - 170°

Gesamtgewicht inkl. Batterien 105 kg

Max. Benutzergewicht 150 kg

Batterieladegerät 6 A

Power Modul 60 A (optional 80 A)

Reichweite bis zu 25 km

Höchstgeschwindigkeit 6 / 8 km/h

Motorleistung 2 x 220 W


Max. Hindernishöhe 50 mm

CE geprüft nach EN12182 / EN12184

VERFÜGBARE FARBEN



ELEKTRISCHE VERSTELLUNGEN

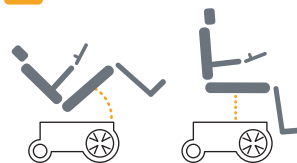

ÜBERZEUGEN SIE SICH SELBST!

Reha-Med Hilfsmittel GmbH

Eichwaldstraße 9

44319 Dortmund

Tel.: +49 (0)231 51 91 61 52

Fax.: +49 (0)231 51 91 61 54

kundenservice@rehamedpower.de