

REHAMEDPOWER



anatomisch anpassbares Rückensystem

BEK ROUND




Das BEK Round ist ein tief konturiertes Rückensystem für Benutzer mit schlechter Rumpfkontrolle und Haltungsdefiziten, die eine Rücken- und Seitenstütze benötigen. Im Gegensatz zu anderen modularen Rückensystemen können die Konturstützen nicht nur parallel angeordnet, sondern auch in Höhe und Breite asymmetrisch positioniert werden. So

können schwerwiegende Deformitäten des Rumpfes oder skoliothische Fehlhaltungen aufgenommen und begrenzt werden. Das anatomisch anpassbare Rückensystem BEK Round kann zudem in der Tiefe und leicht im Winkel eingestellt werden. Bei Hyperlordosen ist der BEK Round mit verschiedenen Lendenwirbelstützen individuell anpaßbar. Der Memoryschaumeinsatz reduziert den Auflagedruck, waschbare atmungsaktive Bezüge gewährleisten eine dauerhafte und langlebige Nutzung.



Größe	Breite	Höhe	Rollstuhlbreite
B1	30 cm	35 / 40 cm	26-30 cm
B2	34 cm	40 / 45 cm	26-34 cm
B3	38 cm	45 / 50 cm	34-38 cm
B4	42 cm	45 / 50 / 55 cm	38-42 cm
B5	46 cm	45 / 50 / 55 cm	42-46 cm
B6	50 cm	55 cm	46-50 cm
B7	54 cm	50 cm	48-52 cm

Die Größen B1 bis B5 sind in verschiedenen Höhen erhältlich.

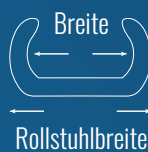

geprüft



Max. Gewicht



Nahtlos



www.REHAMEDPOWER.de
kundenservice@rehamedpower.de

Reha-Med Hilfsmittel GmbH

BB BUDDY BRACE

REHAMEDPOWER




anatomisch anpassbares Rückensystem

BEK SHIFT

Das BEK Shift ist ein flach konturiertes Rückensystem zur Unterstützung einer aufgerichteten Sitzhaltung unter Erhaltung der eigenen Beweglichkeit.

Einzigartige Anpassbarkeit erhält das BEK Shift Rückensystem durch die breite Auswahl an Pelottierungen. Sie bieten mit verschiedenen Formen den nötigen Halt für eine ideale Haltungskorrektur. Die Polster werden hierbei mit einer festen oder wegschwenkbaren Aufnahme am Rückensystem montiert. Die Größe der Polster kann gewählt und die Aufnahmen jeweils in der Höhe auf die individuellen Bedürfnisse eingestellt werden.

Der Memoryschaumeinsatz garantiert eine effiziente Verteilung des Körpergewichts mit atmungsaktiven Bezügen und einem thermohygrometrischem Gleichgewicht.

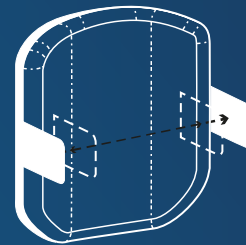

geprüft



Max. Gewicht



Nahtlos



Rollstuhlbreite



Feststehende oder wegschwenkbare Pelottierungen mit flachen, konturierten und körperumschließend Polstern.

Größe	Breite	Höhe	Rollstuhlbreite
B1	26 cm	30 cm	24-28 cm
B2	30 cm	35 / 40 cm	26-30 cm
B3	34 cm	40 / 45 cm	30-34 cm
B4	38 cm	45 / 50 cm	34-38 cm
B5	42 cm	45 / 50 / 55 cm	38-42 cm
B6	46 cm	45 / 50 / 55 cm	42-46 cm
B7	50 cm	55 cm	46-50 cm
B8	54 cm	50 cm	48-52 cm

Die Größen B2 bis B6 sind in verschiedenen Höhen erhältlich.

