


Modulair Zitsysteem

PEEZY

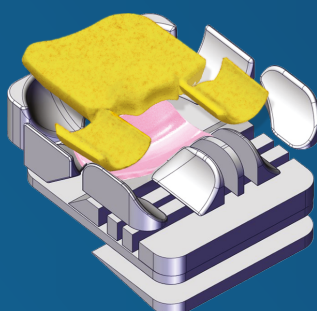

Het Peezy zitsysteem is een modulair opgebouwd zitconcept dat kan worden gebruikt om in te spelen op de individuele uitdagingen van een fysiologische zitpositie.

De aanpasbare structuur van de modules maakt bijvoorbeeld een verminderde of adductieve, altijd verticale zithouding mogelijk, waardoor de zitbeenknobbels worden ontlast en spanningspunten

worden vermeden. Een flexiepositie van het bekken wordt vermeden en een heupcentrering voor een stabiel rechttrekken van het bovenlichaam wordt bereikt. De posterieure adductoren kunnen worden ontlast tijdens de ondersteuning van de tuberositas. Verschillen in beenlengte en heupdysplasie, evenals torsiescoliose, kunnen worden gecompenseerd met het Peezy zitsysteem. Met dit zitconcept kunt u ook individuele behandelingen realiseren zonder de tijdrovende fabricage van een zitschaal.



Positioneringsvoorbeelden



Gefixeerde abductie



Scheefstand



Asymmetrisch



Bekkenscheefstand

Maat	Breedte	Diepte
P1	26 cm	26-30 cm
P2	30 cm	30-34 cm
P3	30 cm	36-40 cm
P4	34 cm	40-44 cm
P5	36 cm	40-44 cm
P6	38 cm	44-48 cm
P7	42 cm	40-44 cm
P8	42 cm	46-52 cm
P9	44 cm	46-50 cm
P10	48 cm	48-52 cm

Alle breedtes en dieptes modulair aanpasbaar



Gecertificeerd



Max. gewicht



Naadloos




Bewerkbaar



Modulair Zitsysteem

PEEZY LIGHT


Positioneringsvoorbeelden

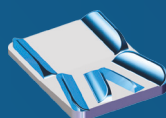

Gefixeerde abductie




Scheefstand

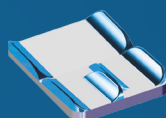

Asymmetrisch



Bekkenscheefstand

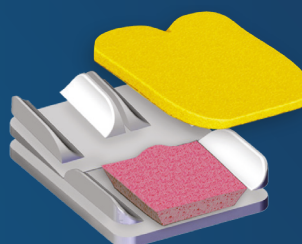

Het modulaire Peezy Light zitsysteem met een vlakke basis en ondersteunende bekledingskussens maakt een breed scala aan zorg mogelijk, vooral voor actieve gebruikers. Variabele abductie en adductie, een actieve bekkenkanteling,

de compensatie van asymmetrieën en de ademende, drukverlagende traagschuimvulling passen zich aan de individuele omstandigheden van het lichaam aan. De open constructie in het sacrum- en stuitbeengebied ondersteunt ook een fysiologische zithouding met intacte rompspieren. Met het Peezy Light zitsysteem kunnen perfecte zitposities worden gerealiseerd.

Maat	Breedte	Diepte
P1	26 cm	26-30 cm
P2	30 cm	30-34 cm
P3	30 cm	36-40 cm
P4	34 cm	40-44 cm
P5	36 cm	40-44 cm
P6	38 cm	44-48 cm
P7	42 cm	40-44 cm
P8	42 cm	46-52 cm
P9	44 cm	46-50 cm
P10	48 cm	48-52 cm

Alle breedtes en dieptes modulair aanpasbaar



Max. gewicht



Naadloos



Bewerkbaar